



ONE SMARTDIET

USER GUIDE

VERSION 2.0

SD-W10


iOS와 Android에서 호환됩니다.

제품 사용 전에 매뉴얼을 숙지하고,
사용하면서도 매뉴얼을 참조하세요.


OSD
ONESOFTDIGM

1 CONFIGURATION

 ONE SMARTDIET

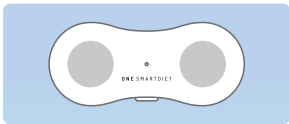

원스마트다이어트 디바이스

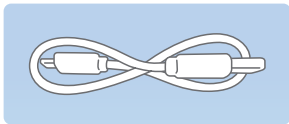

USB 케이블



파우치



매뉴얼

2 FEATURES

 ONE SMARTDIET

전면부 LED 램프

작동 중에는 푸른색,
충전 중에는 붉은색으로 표시됩니다.

4개의 전극 센서

4개의 전극 센서를 통해 근육량
· 체지방률 등을 측정합니다.

활동량 센서

활동량을 측정합니다.

전원 버튼


가볍게 버튼을 누르면
LED 램프가 점등되며 기기가
활성화되거나 꺼집니다.

3 HOW TO USE

- 1 구글 플레이스토어 또는 애플 앱스토어에서 원스마트다이어트 앱을 내려받아 설치하고 실행합니다.



- 2 원스마트다이어트 앱을 사용하려면 기본 사용자 정보를 제공해주시요.

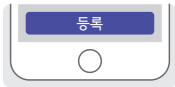


- 3 측정 버튼을 누르고 기기 전원을 켜세요. LED 가 점등되며 스마트폰과 연동됩니다.



ONE SMARTDIET

- 4 BIA 기술로 신체를 5초간 스캔하며 측정합니다.

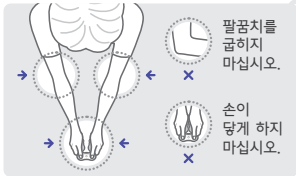

- 5 원스마트다이어트 앱의 다양한 메뉴에서 측정 결과와 분석을 확인하십시오.



4 USER GUIDE





애플 앱
스토어에서
iOS
앱 내려받기



구글 플레이
스토어에서
안드로이드
앱 내려받기

ONESMARTDIET는 체성분 등 다양한 정보를 측정할 수 있는 휴대용 측정기입니다.

- ▶ 원스마트다이어트는 스마트폰의 블루투스 기능으로 데이터를 연동할 수 있습니다. 스마트폰의 블루투스 기능을 활성화하십시오.
- ▶ 안드로이드 버전 4.4, iOS 버전 9.0 이상의 기기와 호환되며, 스마트폰에 최적화되어 있습니다. 안드로이드 태블릿과 아이패드에는 지원되지 않을 수 있습니다.
- ▶ 스마트폰에서 Pin 번호를 요청 시 별도 번호를 넣을 필요가 없습니다. 바로 원스마트다이어트 앱을 실행하면 됩니다.

- 1  구글 플레이스토어 또는  애플 앱스토어에서 **One SmartDiet**를 검색해 앱을 내려받거나 홈페이지에서 내려받으십시오.
- 2 앱을 실행해 사용자 정보를 등록하십시오.
- 3 원스마트다이어트 기기의 전원을 켜고 측정하십시오.

5 WARNING

원스마트다이어트는 의료 기기가 아니며, 질병의 진단·치료·치유·예방을 위한 제품이 아닙니다.

- ▶ 원스마트다이어트는 심장박동 조절기, 심전도 의료기, 인공심장, 인공심폐기 등의 생체 기기에 영향을 줄 수 있으므로 함께 사용하지 마십시오.
- ▶ 원스마트다이어트는 BIA 기법을 이용하므로 임신 혹은 생리 기간에 측정 오차가 심할 수 있습니다. 또한 안전을 위하여 임산부, 노약자, 극도의 심신 허약자는 사용하지 마십시오.
- ▶ 50kHz 약 150uA 이하의 미세전류를 사용하므로 측정 중 전류가 느껴지지 않습니다. 만약 측정 중 전류가 느껴진다면 사용하지 마십시오.
- ▶ 반드시 사용 용도로만 사용하고 다른 용도로 사용하지 마십시오. 기기의 분해 개조를 금지합니다. 던지거나 외부에 충격을 주지 마십시오.

- 주의
- ▶ 전자레인지 등 강력한 전자기파를 발생시키는 기기 근처에서 사용하지 마십시오. 측정 오류가 발생할 수 있습니다.
 - ▶ 배터리에 중금속이 포함되어 있으니 절대로 먹거나 분해하지 마십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - ▶ 본 기기와 액세서리, 배터리 등을 폐기할 때는 반드시 지역 법을 준수해야 합니다.

6 WARRANTY



- ▶ 보증기간은 구매 후 1년이며, 사용설명서에 따른 정상적인 사용 상태에서 제품이 고장 났다면 무상으로 부품을 교환 받을 수 있습니다.
- ▶ 보증기간 후에는 유상으로 부품을 교환 받을 수 있습니다.
- ▶ 부품 교환은 동일 상품, 동일 색상이 원칙입니다.
- ▶ 제품 교환 시 운송비는 고객 부담입니다.
- ▶ 아래의 상황에서는 보증기간 중에도 유상 서비스가 제공될 수 있습니다.
 - 충격에 의한 고장 또는 손상
 - 잘못된 사용이나 부주의, 부당한 수리나 개조
 - 제품 내부에 물이나 액체가 들어가며 생긴 부품 손상
 - 사용에 따른 외관 변화

원스마트다이어트를 사용하면서 문제가 발생한다면 아래 연락처로 문의해주시시오.

info@onesoftdigm.com

7 DEVICE DESCRIPTION



제품명	ONESMARTDIET
모델명	SD-W10
상호명	주식회사 원소프트다임
제조사	주식회사 원소프트다임
제조국가	대한민국

▶ 제조년월일은 별도 표기합니다.

본 설명서의 내용(주의 사항 포함)은 하드웨어나 소프트웨어, 제품 구성 등의 성능 향상 또는 기타 사유로 사용자의 사전 동의나 별도 공지 없이 변경될 수 있습니다.



ONE SMARTDIET

Tel **+82-54-279-4467**

Fax **+82-50-4047-8250**

E-Mail **info@onesoftdigm.com**

Homepage **smartdiet.onesoftdigm.com**
www.onesoftdigm.com

사용 설명서에 나오는 일부 이미지는
실제 제품과 다를 수 있습니다.

OSD
ONESOFTDIGM

자세한 내용은 웹 매뉴얼에서
확인할 수 있습니다.
QR코드를 이용해 접속하십시오.



ONE SMARTDIET